




ACサイザー パーシャル ACサイザー トータル

AC^{SIZER} SYSTEM SINGLE-USE SIZERS

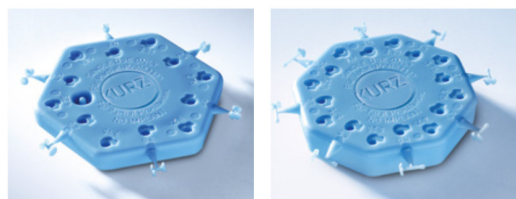

ディスペンサーボックス (単位: 10枚入/箱)

適切なプロセスの長さ

プロセスのサイズを一定かつ正確に決めることは、重要です。

2種類のサイザーディスク

KURZ 鼓室形成術用プロセスの長さを決定するために、サイザーディスクに取り付けられたサイザーを使って、プロセスの長さを迅速かつ確実に決定することができます。

サイジングディスクには2つのバージョンがあります。

- TORP用サイザーディスク(サイザー8個付)
- PORP用サイザーディスク(サイザー7個付)

術中の操作を容易にする機能

軽量かつ理想的なバランスにより、術中の操作を容易にします。また、エレガントなデザインにより、最適な視認性を提供します。

ディスクの裏面には、鼓膜とプロセスの間に配置する軟骨や筋膜などの移植片の最小サイズを決定するためのテンプレートが用意されています。

また、PORP用サイザーディスクには、ベルを拡張するための装置も搭載されています。

10枚入/箱 滅菌済



マイクロ剪刀

製品番号	製品名/規格
8000 172	マイクロ剪刀
	全長 100mm 先端長 8.5mm
8000 136	チタン鑷子
	全長 118mm



チタン鑷子



製品番号	製品名
8000 540N ^{※1}	AC サイザー パーシャル (10枚入/箱)
8000 550N ^{※1}	AC サイザー トータル (10枚入/箱)

重要: ACサイザーは、中耳の手術の際に計測用として一時的に使用するものです。インプラントするものではありません。

医療機器届出番号:20B3X10018800100
医療機器認証番号:305ADBZIO0051000

販売名クルツ 鼓室形成手術セット
販売名クルツ 鼓室形成手術機器 (ACサイザー、軟骨カッターブレード)^{※1}

製造販売業者 シカゴ東京メディカル株式会社
有限会社プライムファイン^{※1}

販売業者  **クルツメディカル株式会社**
〒151-0066
東京都渋谷区西原1丁目38-3
TEL 03-6284-0598
www.kurzmedical.jp



取扱店

■仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
■ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」「添付文書」をお読みください。
03/2018-M9600320-01/2024